

# SecuFix Маточный манипулятор

Данные для заказа



## SecuFix набор маточного манипулятора

состоит из: SecuFix маточный манипулятор (8370701), SecuFix маточный зонд с градуированной шкалой (8370702), SecuFix Набор стерильных трубок для фиксации и вакуума (набор из 10 шт, стерильные, 41708370), щетка для чистки (6.05), щетка для чистки (6.09), запасные уплотительные колпочки (набор из 10 штук, 89.02) ..... 83707011

## Аксессуары



Маточный зонд ..... 8365.00



Световод

Гибко-волоконный Ø 3.5 мм  
(маркировка оранжевого цвета),  
длина 2.3 м ..... 806635231



## Соединительная трубка

для механической очистки длина  
600 мм ..... 163915



## RIWO System Tray

для стерилизации контейнер для  
инструментов с внутренними раз-  
мерами 500 x 200 x 60 мм, стерили-  
зуемых паром ..... 38201.586

## Безопасность в новом свете



## SecuFix Маточный манипулятор

Инновационная система с  
«кольпотрансиллюнацией» зоны  
резекции и вакуумной фиксацией

Совершенствование методик малоинвазивной гистероэктомии на сегодняшний день позволяет использовать лапароскопическую гистероэктомию все чаще.

Новый маточный манипулятор SecuFix определяет новые стандарты безопасности. Атравматическая фиксация матки с использованием вакуумной аспирации и «кольпотрансиллюминации» (дистальное кольцевое освещение шейки матки) характеризуют новый маточный манипулятор, как продукт не имеющий аналогов.

Эти детали являются важными факторами для оптимального хирургического результата и позволяют соблюдать стандарты в онкохирургии, не пропуская ткани вовлеченные в онкологический процесс.

#### Удобство в деталях

SecuFix имеет модульную конструкцию, состоящую всего из трех частей, что положительно скажется в вопросах эксплуатации и экономии.


- Маточный манипулятор
- Градуированный маточный зонд
- Кольпотрансиллюминатор

#### «Кольпотрансиллюминатор» – идеальная операционная платформа


- Оптимальное разграничение шейки матки и влагалища
- Наилучшая визуализация свода

#### Стабильность означает контроль

Маточный манипулятор SecuFix надежный инструмент, который позволяет хирургу перемещать матку в любом направлении.

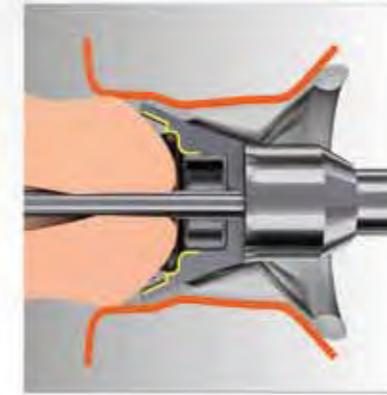

)) Универсальный размер

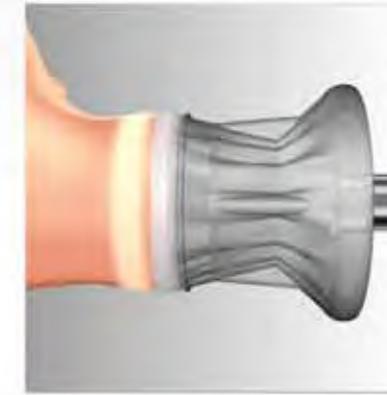

«Кольпо-трансиллюминатор»



Вакуумная фиксация

Коническая форма купола насадки позволяет использовать манипулятор вне зависимости от особенностей размеров шейки и влагалища. Эластичная манжета создает условия для стабильного пневмоперитонеума.

Кольцевая подсветка позволяет оптимально визуализировать край резекции и в то же время дает возможность оценить в каком положении находится манипулятор во влагалище.

Аспирация в матке и шейке матки обеспечивает надежную атравматическую фиксацию. Это дает точную локализацию резецируемой ткани.

