

ШОВ И ЛИГАТУРА

ИГЛОДЕРЖАТЕЛИ 214-230
размер 2 – 5 мм



ПРОТАЛКИВАТЕЛИ УЗЛОВ 231-236
размер 3,5 – 5 мм



ЧРЕСКОЖНЫЙ И ФАСЦИАЛЬНЫЙ ШВЫ 237



КЛИП-АППЛИКАТОРЫ, размер 10 мм 238-239
И ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ЛИГАТУРНАЯ ПЕТЛЯ



ИЗОГНУТЫЕ ИГЛОДЕРЖАТЕЛИ
для однопортовой хирургии, см. главу 10

Иглодержатель


размер 2 мм

slimline

XS

Операционный инструмент, длина 20 см,
для использования с троакарами размером 2,5 мм

длина	инструмент
20 см	

дистальный конец	инструмент
	30200 FNS Иглодержатель Ультрамикро по КОН, рукоятка прямая, с отключаемой кремальерой

Иглодержатели

размер 3,5 мм

slimline



Операционные инструменты, длина 20 и 36 см,
для использования с троакарами размером 3,5 мм

длина	инструмент
20 см	
36 см	


дистальный конец	инструмент
	НОВИНКА 26167 LNS
	НОВИНКА 26167 LNL
	НОВИНКА 26167 RNS
	НОВИНКА 26167 RNL

Иглодержатель Ультрамикрo по КОН,
бранши загнуты влево, с карбид-вольфрамовой
вставкой, рукоятка прямая, с отключаемой кремальерой

Иглодержатель Ультрамикрo по КОН,
бранши загнуты вправо, с карбид-вольфрамовой
вставкой, рукоятка прямая, с отключаемой кремальерой

размер 3,5 мм

Операционные инструменты, длина 20 и 36 см,
для использования с троакарами размером 3,5 мм

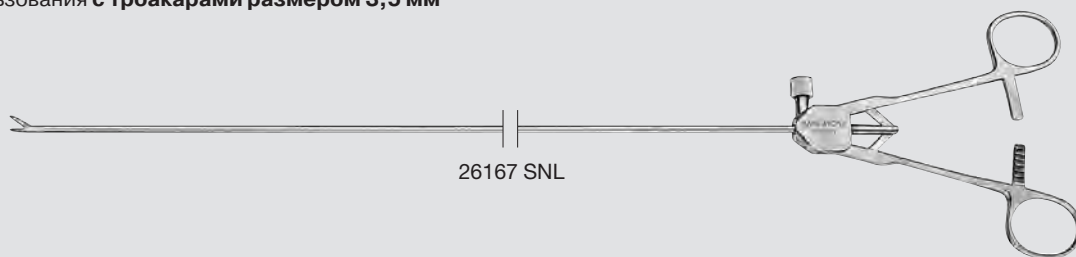

26167 SNL
новинка

Иглодержатель по SAWALHE, бранша открывается на 90°, аксиальная кольцевая рукоятка с кремальерой, размер 3,5 мм, длина 36 см



26167 MNS
новинка


Иглодержатель по LIMA, бранши загнуты влево, аксиальная кольцевая рукоятка с кремальерой, размер 3,5 мм, длина 20 см





Иглодержатели «PARROT-JAW®»

по SZABO-BERCI

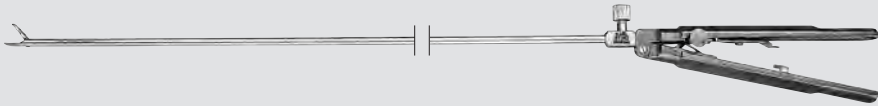размер 5 мм

Операционные инструменты, **длина 33 см**,
для использования с троакарами размером **6 мм**

длина	инструмент
33 см	

дистальный конец	инструмент	
	26173 SC	Иглодержатель «PARROT-JAW®» по SZABO-BERCI, рукоятка прямая, с фиксатором, для шовного материала 2/0 – 4/0, размер игл SH (Ethicon), EN-S (Ski), V-20 (USSC)
	26173 SE	Иглодержатель «PARROT-JAW®» по SZABO-BERCI, с карбид-вольфрамовой вставкой, рукоятка прямая, с фиксатором, для шовного материала 2/0 – 4/0, размер игл SH (Ethicon), EN-S (Ski), V-20 (USSC)
	26173 CQ	Иглодержатель «PARROT-JAW®» по SZABO-BERCI, рукоятка прямая, с фиксатором, для шовного материала 4/0 – 6/0, размер игл RB (Ethicon), CV-23 (USSC)
	26173 CE	Иглодержатель «PARROT-JAW®» по SZABO-BERCI, с карбид-вольфрамовой вставкой, рукоятка прямая, с фиксатором, для шовного материала 4/0 – 6/0, размер игл RB (Ethicon), CV-23 (USSC)

Обратите внимание:

Использование иглодержателя с иглами, размер которых больше рекомендуемого, может привести к повреждению инструмента.

Иглодержатель «PARROT-JAW®»

по SZABO-BERCI


размер 5 мм


Операционные инструменты, **длина 33 см**,
для использования с **троакарами размером 6 мм**

с браншами с алмазным покрытием

Отличительные признаки:

- Алмазное покрытие, обеспечивающее оптимальную безопасность при фиксации иглы в любом положении
- Точно устанавливаемый фиксатор с легким ходом, позволяющий легко и надежно позиционировать иглу

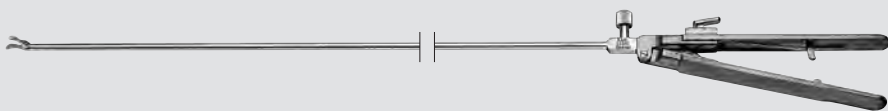длина	инструмент
33 см	

дистальный конец	инструмент
	26173 SP Иглодержатель «PARROT-JAW®» по SZABO-BERCI, бранши с алмазным покрытием, рукоятка прямая, с фиксатором, для шовного материала 2/0 – 4/0, размер игл SH (Ethicon), EN-S (Ski), V 20 (USSC)

Обратите внимание:


Использование иглодержателя с иглами, размер которых больше рекомендуемого, может привести к повреждению инструмента.




Контриглодержатели «FLAMINGO-JAW®»

по SZABO-BERCI

размер 5 мм

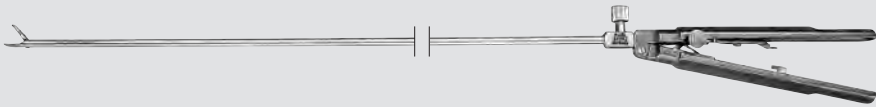Операционные инструменты, **длина 33 см**,
для использования с троакарами размером 6 или 11 мм с редукционной гильзой

длина	инструмент
33 см	

дистальный конец	инструмент
	Контриглодержатель «FLAMINGO-JAW®» по SZABO-BERCI, рукоятка прямая, с фиксатором, для шовного материала 4/0 – 6/0, размер игл RB (Ethicon), CV-23 (USSC)
	Контриглодержатель «FLAMINGO-JAW®» по SZABO-BERCI, рукоятка прямая, без фиксатора, для шовного материала 4/0 – 6/0, размер игл RB (Ethicon), CV-23 (USSC)
	Контриглодержатель «FLAMINGO-JAW®» по SZABO-BERCI, рукоятка прямая, без фиксатора, для шовного материала 2/0 – 4/0, размер игл SH (Ethicon), EN-S (Ski), V-20 (USSC)

Обратите внимание:

Использование иглодержателя с иглами, размер которых больше рекомендуемого, может привести к повреждению инструмента.

Макроиглодержатели по КОН

размер 5 мм

Операционные инструменты, **длина 33 и 43 см**, для использования с **троакарами размером 6 мм**


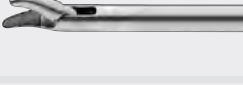

Эргономичные свойства нового 5-миллиметрового макроиглодержателя по КОН позволяют точно держать как иглу, так и нить. Благодаря прецизионным браншам и новому замку точнейшее наложение шва с применением нитей толщиной от 0/0 до 7/0 стало легкой задачей.

Набор инструментов серии Ультрамикро по КОН, разработанный специально для решения сложных задач лапароскопической микрохирургии, позволяет накладывать микрошвы и сшивать даже структуры размером всего 0,5 мм.

Отличительные признаки:

- Карбид-вольфрамовые вставки позволяют стабильно и надежно удерживать иглу.
- Легко управляемая и точно устанавливаемая кремальера позволяет просто и надежно позиционировать иглу.
- Рукоятка эргономичной формы обеспечивает удобное пользование.


длина	инструмент
33 см	
43 см	





дистальный конец	инструмент	
	26173 KAF	Макроиглодержатель по КОН, с карбид-вольфрамовой вставкой, эргономичная прямая рукоятка с отключаемой кремальерой, фиксатор справа, бранши прямые
	26178 KAF	
	26173 KAL	Макроиглодержатель по КОН, с карбид-вольфрамовой вставкой, эргономичная прямая рукоятка с отключаемой кремальерой, фиксатор справа, бранши загнуты влево
	26178 KAL	
	26173 KAR	Макроиглодержатель по КОН, с карбид-вольфрамовой вставкой, эргономичная прямая рукоятка с отключаемой кремальерой, фиксатор слева, бранши загнуты вправо
	26178 KAR	

Макроиглодержатели по КОН, контриглодержатель по КОН

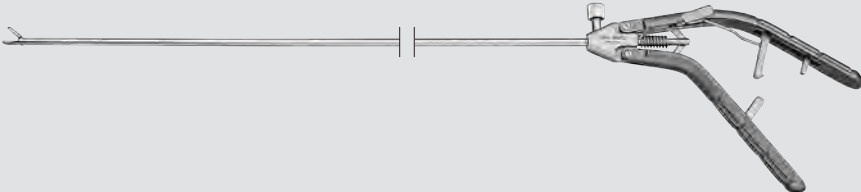размер 5 мм


Операционные инструменты, длина 33 и 43 см,
для использования с троакарами размером 6 мм



длина	инструмент
33 см	
43 см	


дистальный конец	инструмент	
	26173 KPF	Макроиглодержатель по КОН, с карбид-вольфрамовой вставкой, эргономичная рукоятка-пистолет с отключаемой кремальерой, фиксатор слева, бранши прямые
	26178 KPF	
	26173 KPL	Макроиглодержатель по КОН, с карбид-вольфрамовой вставкой, эргономичная рукоятка-пистолет с отключаемой кремальерой, фиксатор слева, бранши загнуты влево
	26178 KPL	
	26173 KPR	Макроиглодержатель по КОН, с карбид-вольфрамовой вставкой, эргономичная рукоятка-пистолет с отключаемой кремальерой, фиксатор справа, бранши загнуты вправо
	26178 KPR	
	НОВИНКА 26173 KG	Контриглодержатель по КОН, эргономичная рукоятка-пистолет с отключаемой кремальерой, фиксатор слева, прямые бранши с дистальными отверстиями

размер 5 мм

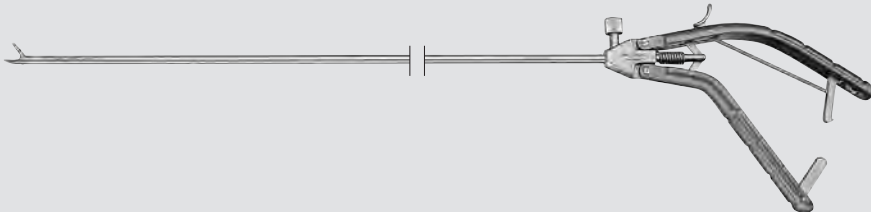Операционные инструменты, длина 33 и 43 см,
для использования с троакарами размером 6 мм

длина	инструмент
33 см	

дистальный конец	инструмент	
	26173 KL	Макроиглодержатель по КОН, с карбид-вольфрамовой вставкой, эргономичная рукоятка с кремальерой, фиксатор сверху, бранши загнуты влево
	26173 KC	Макроиглодержатель по КОН, с карбид-вольфрамовой вставкой, эргономичная рукоятка с кремальерой, фиксатор сверху, бранши загнуты вправо

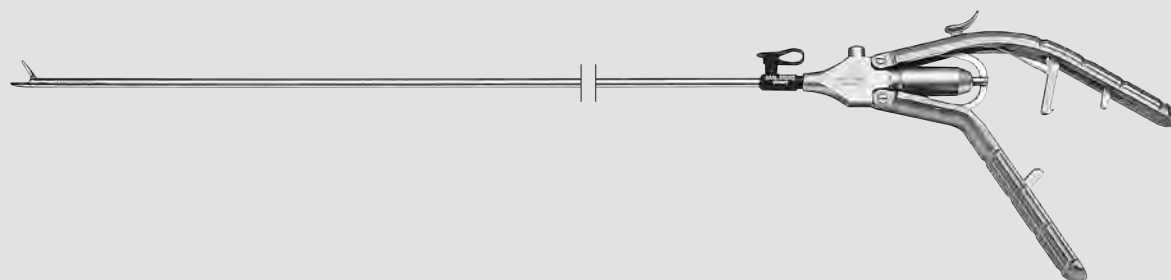

Макроиглодержатели по КОН, размер 5 мм, разборные, состоят из:

- рукоятки
- внешнего тубуса
- рабочей вставки

Как производитель инструментов компания KARL STORZ придает все большее значение очистке и стерилизации инструментов.

Очистка и гигиена играют важную роль при использовании хирургических инструментов, в данном случае – иглодержателей. Способность наших макроиглодержателей по КОН

подвергаться разборке приводит к заметному улучшению результата очистки, гарантируя при этом привычную эффективность и точность инструментов. Рукоятка, внешний тубус и внутренняя часть могут подвергаться тщательной очистке и стерилизации по отдельности.


Разборные многоразовые макроиглодержатели предоставляют пользователю следующие преимущества:

- Разбираются на три части
- Полностью автоклавируемые
- Разъем для чистки
- Выбор между шестью различными рукоятками и тремя различными рабочими вставками
- Бранши с карбид-вольфрамовыми вставками
- Соответствие экологическим нормам: в случае поломки заменяется только неисправная деталь
- Простое и эргономичное обращение с инструментом


Рукоятки и внешние тубусы

Макроиглодержатели по КОН, разборные


Рукоятки, аксиальные и в форме пистолета, с отключаемой кремальерой

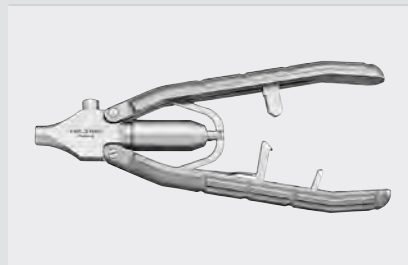

30173 AR **Рукоятка**, аксиальная, с **отключаемой** кремальерой, фиксатор справа

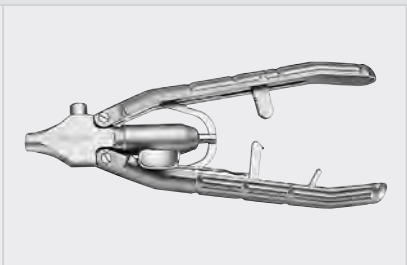

30173 AL **Рукоятка**, аксиальная, с **отключаемой** кремальерой, фиксатор слева

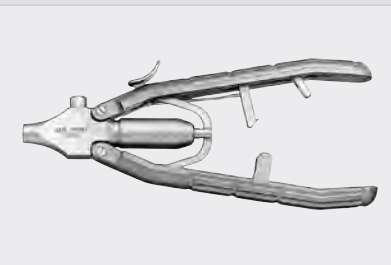

30173 AO **Рукоятка**, аксиальная, с **отключаемой** кремальерой, фиксатор сверху



30173 PR **Рукоятка**, в форме пистолета, с **отключаемой** кремальерой, фиксатор справа




30173 PL **Рукоятка**, в форме пистолета, с **отключаемой** кремальерой, фиксатор слева



30173 PO **Рукоятка**, в форме пистолета, с **отключаемой** кремальерой, фиксатор сверху

Металлические внешние тубусы

размер 5 мм

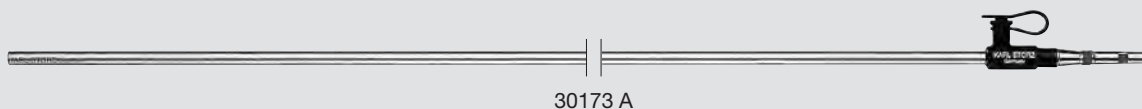
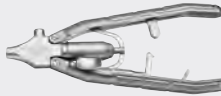
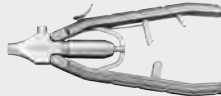
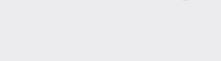

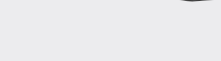


- 30173 A **Металлический внешний тубус**, разъем с замком LUER для чистки, размер 5 мм, длина 33 см
- 30178 A **То же**, длина 43 см

Макроиглодержатели по КОН разборные

размер 5 мм

Операционные инструменты, **длина 33 и 43 см**, с аксиальной рукояткой для использования с **троакарами размером 6 мм**

длина	рукоятка		
	30173 AR	30173 AL	30173 AO
33 см			
43 см			

Одна бранша подвижна

рабочая вставка	номер инструмента в сборе		
30173 R	30173 RAR	30173 RAL	30173 RAO
30178 R	30178 RAR	30178 RAL	30178 RAO



Макроиглодержатель по КОН, бранши загнуты вправо, с карбид-вольфрамовой вставкой, для использования с шовным материалом размером 0/0 – 7/0

30173 L	30173 LAR	30173 LAL	30173 LAO
30178 L	30178 LAR	30178 LAL	30178 LAO



Макроиглодержатель по КОН, бранши загнуты влево, с карбид-вольфрамовой вставкой, для использования с шовным материалом размером 0/0 – 7/0

30173 F	30173 FAR	30173 FAL	30173 FAO
30178 F	30178 FAR	30178 FAL	30178 FAO



Макроиглодержатель по КОН, бранши прямые, с карбид-вольфрамовой вставкой, для использования с шовным материалом размером 0/0 – 7/0

30173 G	30173 GAR	30173 GAL	30173 GAO
---------	-----------	-----------	-----------

НОВИНКА



Макроконтриглодержатель по КОН, бранши прямые

Макроиглодержатели по КОН разборные

размер 5 мм

Операционные инструменты, **длина 33 и 43 см**, с рукояткой в форме пистолета для использования с троакарами размером 6 мм

длина	рукоятка		
	30173 PR	30173 PL	30173 PO
33 см			
43 см			

Одна бранша подвижна

рабочая вставка	номер инструмента в сборе		
30173 R	30173 RPR	30173 RPL	30173 RPO
30178 R	30178 RPR	30178 RPL	30178 RPO



Макроиглодержатель по КОН, бранши загнуты вправо, с карбид-вольфрамовой вставкой, для использования с шовным материалом размером 0/0 – 7/0

30173 L	30173 LPR	30173 LPL	30173 LPO
30178 L	30178 LPR	30178 LPL	30178 LPO



Макроиглодержатель по КОН, бранши загнуты влево, с карбид-вольфрамовой вставкой, для использования с шовным материалом размером 0/0 – 7/0

30173 F	30173 FPR	30173 FPL	30173 FPO
30178 F	30178 FPR	30178 FPL	30178 FPO



Макроиглодержатель по КОН, бранши прямые, с карбид-вольфрамовой вставкой, для использования с шовным материалом размером 0/0 – 7/0

30173 G	30173 GPR	30173 GPL	30173 GPO
---------	-----------	-----------	-----------

НОВИНКА



Макроконтриглодержатель по КОН, бранши прямые

Иглодержатель

размер 5 мм

Операционные инструменты, **длина 36 см**,
 для использования с троакарами размером **6 или 11 мм с редукционной гильзой**

Набор инструментов для эндоскопических швов

Набор инструментов KARL STORZ для эндоскопических швов представляет собой ряд инструментов, сконструированных по анатомическим и функционально-оперативным критериям. Это нашло свое отражение в первую очередь в новых рукоятках иглодержателей и контр-иглодержателей. Заметно отличающееся от обычных инструментов расположение рукоятки относительно продольной оси инструмента дает возможность хирургу

манипулировать иглодержателем как непосредственным, прямым продолжением предплечья. Кольцевая рукоятка анатомической формы позволяет держать и вести инструмент всей рукой. Эргономичная форма не только обеспечивает прецизионное наложение швов, но и предотвращает чрезмерную нагрузку на отдельные группы мышц предплечья и связанные с этим проявления усталости.



26174 SQ

26174 SQ


Иглодержатель, прямой, с карбид-вольфрамовыми вставками, эргономичная рукоятка по CHERON с хирургической кремальерой, размер 5 мм, длина 36 см, для использования с ложкообразной иглой 26173 L, с рассасывающейся синтетической нитью, стерильный, 12 шт./упаковка, USP 2/0, длина 20 см

Обратите внимание:

Использование иглодержателя с иглами, размер которых больше рекомендуемого, может привести к повреждению инструмента.

размер 5 мм

Операционные инструменты, **длина 33 см**,
для использования с троакарами размером **6 мм или 11 мм с редукционной гильзой**

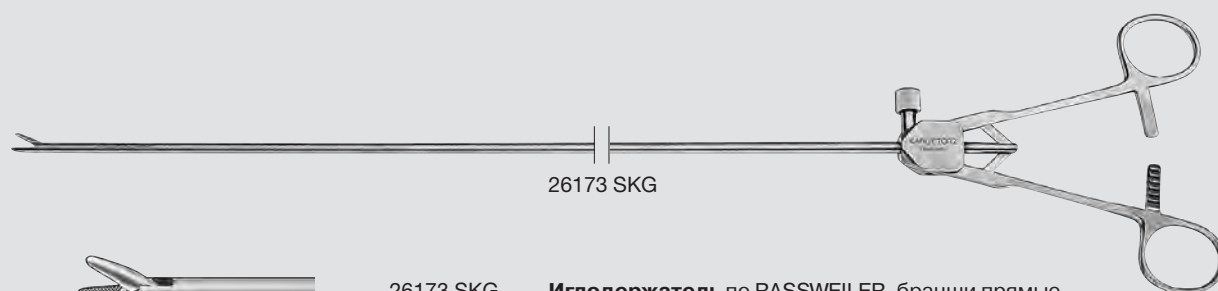

26173 SKG

26173 SKG

Иглодержатель по RASSWEILER, бранши прямые, аксиально-кольцевая рукоятка с кремальерой, размер 5 мм, длина 33 см, для шовного материала 2/0 – 4/0, размер игл SH и RB (Ethicon)




26173 SKL

26173 SKL

Иглодержатель по RASSWEILER, вогнутый/выпуклый, бранши тонкие, загнуты влево, аксиально-кольцевая рукоятка с кремальерой, размер 5 мм, длина 33 см, для шовного материала 3/0, размер игл LH и RB-1 (Ethicon)

размер 5 мм

Операционные инструменты, **длина 33 см**,
для использования с троакарами размером 6 или 11 мм с редукционной гильзой

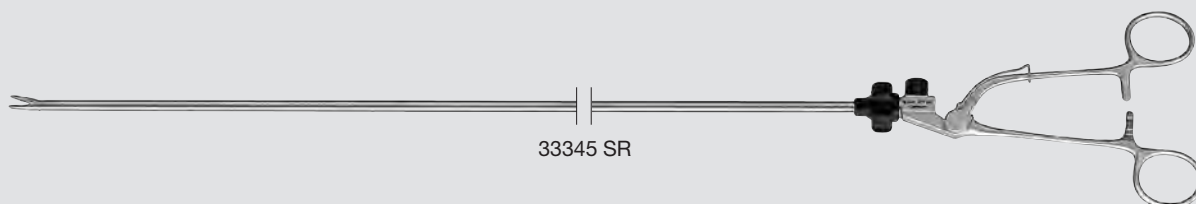

33345 SR



33345 SR

Иглодержатель CLICK'line по MOURET,
бранши прямые, одна бранша подвижна,
размер 5 мм, длина 36 см

Комплектация:

Аксиальная металлическая рукоятка,
с хирургической кремальерой

Металлический внешний тубус

Вставка-иглодержатель, прямая,
бранши с рифлением

Изгибаемый иглодержатель

размер 5 мм

Операционные инструменты, **длина 33 см**,
для использования с **троакарами размером 6 мм**

Ключевая идея разработки этого нового иглодержателя заключается в том, чтобы компенсировать потерю двух пространственных степеней свободы, вызванную тем, что инструмент находится в жесткой канюле в брюшной стенке.

Преимущество:

Расширение радиуса действия в месте операции, как вдоль оси инструмента (выпрямленное положение), так и в загнутом состоянии.

Принцип действия:

Отклонение инструмента достигается путем вращения инструмента на 180° вокруг продольной оси, в результате чего смещаются относительно друг друга обе симметричные половины тубуса, вызывая отклонение дистального конца на 10° – 30°.

Конструкция:

Размер инструмента составляет 5 мм. Инструмент полностью разбирается для очистки и стерилизации.


Клиническое применение:

Инструмент предназначен для всех лапароскопических вмешательств, требующих применения иглодержателя, особенно в тех случаях, когда движения инструмента ограничиваются троакаром, что недопустимым образом сдерживает ход операции.

Практическое применение: кольпосуспензия, фундопликация по Ниссену, лапароскопическая фиксация вагинального промонтория, восстановление проходимости фаллопиевых труб.

Отличительные признаки:

- Дистальный конец отклоняется под углом до 30°
- Полностью разборный инструмент
- Автоклавируемый
- Простое обращение
- Длина 33 см

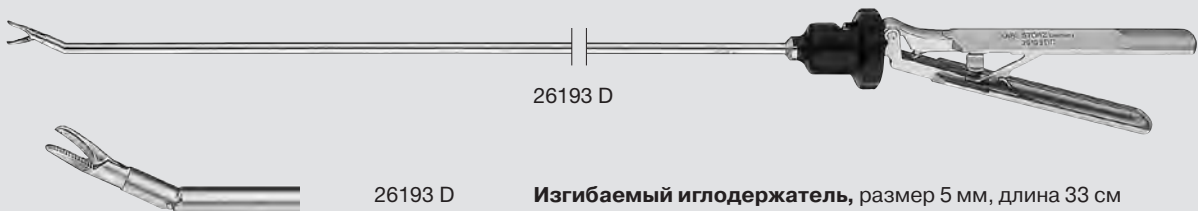

26193 D

26193 D

Изгибаемый иглодержатель, размер 5 мм, длина 33 см

Комплектация:

- Внешний тубус**
- Внутренний тубус**
- Рукоятка**
- Рабочая вставка**

Обратите внимание:

Использование иглодержателя с иглами, размер которых больше рекомендуемого, может привести к повреждению инструмента.

Компоненты/Запасные части, см. главу 21